

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
PNEIMATISKAIS MATRAČIS BioFlote™ 2000**



UZMANĪBU!

Pirms sākat lietot matraci, rūpīgi izlasiet tālāk norādītās instrukcijas.

LIETOŠANAS MĒRĶIS

Šis produkts ir paredzēts personām:

- kurām nepieciešama izgulējumu I stadijas ārstēšana un profilakse, vienlaikus optimizējot pacienta komfortu;
- kuras pastāvīgi atrodas mājas aprūpē īstermiņa aprūpes laikā;
- kurām nepieciešama ārstēšana un sāpju mazināšana, ko izraisa spiediens uz ķermeņa mīkstajiem audiem, pēc ārsta vai rehabilitologa ieteikuma.

Šo produktu var izmantot personas, kurām ir kvalifikācija vispārējo aprūpes procedūru veikšanai un kurām ir atbilstoša apmācība un zināšanas par izgulējumu novēršanu un ārstēšanu.

UZMANĪBU!

Iekārta nav piemērota lietošanai viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu tuvumā.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Izmantojot elektriskās ierīces, īpaši bērnu klātbūtnē, jāievēro visi drošības pasākumi, tostarp šādi.

BRIESMAS!

Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, jāievēro šādi norādījumi:

1. Nelietot matraci peldēšanās laikā.
2. Vienmēr izslēdziet ierīci uzreiz pēc lietošanas.
3. Nenovietojiet un neuzglabājiet ierīci vietās, no kurām tā var nokrist vai tikt ievilkta vannā vai izlietnē.
4. Nelieciet un neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
5. Nepieskarieties ierīcei, kas ir iekritusi ūdenī. Šādā gadījumā nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas.

BRĪDINĀJUMI!

Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai savainošanās risku, jāievēro šādi norādījumi:

1. Novērtējiet iespējamību, ka ierīce var kļūt par slazdu pacientam un var ierobežot viņa kustības vai pilnībā viņu sagūstīt. Ja pastāv liela šādas situācijas iespējamība, pacientam jābūt pastāvīgā uzraudzībā.
2. Neizmantojiet pacientiem ar muguras smadzeņu traumām.
3. Nepieciešams uzraudzīt ierīces darbību, kad tā tiek izmantota bērnu klātbūtnē vai tuvumā. Dažas mazas detaļas var viegli noņemt, radot aizrīšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku.
4. Lietot atbilstoši lietošanas instrukcijā aprakstītajam mērķim. Nelietot citiem mērķiem, kurus ražotājs nav ieteicis. Nelietot citu veidu matračus, kā tos, kurus norādījis ražotājs.
5. Nelietot, ja ierīce nedarbojas pareizi, vads vai kontaktdakša ir bojāta, tā ir nokritusi, bojāta vai iekritusi ūdenī. Šādā gadījumā ierīce jānodod autorizētam servisam pārbaudei/remontam.
6. Turēt strāvas vadu tālu no karstām virsmām.
7. Nebloķēt gaisa ieplūdi. Nenovietot uz mīksta virsmas (gulta, matracis, sega), kas var bloķēt gaisa ieplūdi. Uzturiet sūkņa apkārtni tīru - turiet to tālu no spalvām, matiem, šķiedrām vai citiem sīkumiem.
8. Nemēģiniet pašrocīgi modificēt/remontēt ierīci bez ražotāja atļaujas.
9. Ja jums ir aizdomas par alerģijas simptomiem, kas rodas saskarē ar matraci, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
10. Jebkurš nopietns ar izstrādājumu saistīts incidents jāziņo ražotājam un attiecīgajai dalībvalsts iestādei, kurā lietotājs vai pacients dzīvo.

1. IEVADS

Lietošanas instrukcija jāizmanto sākotnējās komplekta uzstādīšanas laikā vai lai atsvaidzinātu informāciju par pareizu matrača un sūkņa lietošanu.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Mainīga spiediena antidekubitus matraču sistēma izmanto ļoti modernu tehnoloģiju, nodrošinot augstāko ierīces kvalitāti un lietošanas komfortu. Tā ir paredzēta izgulējumu novēršanai un ārstēšanai.

Sistēma ir pārbaudīta un atbilst šādiem standartiem:

EN60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-11:2010, EN 60601-1-2:2007 CISPR 11:2009, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004, IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008.

EMC BRĪDINĀJUMS


Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu ierobežojumiem medicīnas ierīcēm saskaņā ar EN 60601-1-2:2007. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem tipiskā medicīnas instalācijā. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radioviļņus, un, ja tā nav pareizi uzstādīta un lietota saskaņā ar instrukciju, tā var radīt traucējumus citām tuvumā esošām ierīcēm. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi konkrētā instalācijā neradīsies. Ja šī ierīce rada traucējumus citām ierīcēm, kuras var noteikt, ieslēdzot un izslēdzot ierīci, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, izmantojot vienu vai vairākus no šiem veidiem:

- nomainīt uztverošās ierīces virzienu vai novietojumu;
- palielināt attālumu starp ierīcēm;
- pievienot ierīces pie citas strāvas ligzdas, kas nav savienota ar citām ierīcēm;
- lūgt palīdzību ražotājam, piegādātājam vai servisa tehniķim.

2. PRODUKTA UZBŪVE

PNEIMATISKĀS SŪKŅA UZBŪVE

1. Gaisa izplūdes sprauslas;
2. Apgaismots barošanas slēdzis;
3. Spiediena regulators;
4. Āķi sūkņa piekāršanai.

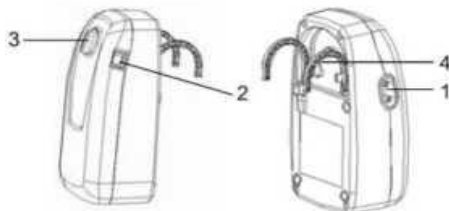

PRETIZGULĒJUMA KOMPLEKTA UZBŪVE

5. Pneimatiskais matracis;
6. Gaisa caurules, kas savieno sūkni ar matraci;
7. Sūknis ar spiediena regulēšanu pneimatiskajam matracim BioFlote™ 2000.



3. UZSTĀDĪŠANA

IZPAKOŠANA

Sūkņi un matrācis ir iepakoti kartona kastē, lai aizsargātu tos no bojājumiem. Izpakojiet iepakojumu un pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nekas nav bojāts. Bojājuma gadījumā nekavējoties sazinieties ar pārdevēju.

NOVIETOŠANA

- 1) Novietojiet matrāci uz gultas. Ieteicams matrāci novietot tā, lai ieplūdes sprauslas atrastos pie kāju puses. Pārlicinieties, ka matrāča malas no abām pusēm ir novietotas zem gultas matrāča.



UZMANĪBU!

Matrācis ir jāpārklāj ar palagu, lai novērstu ādas kontaktu ar matrāci. Tas uzlabos pacienta komfortu un pasargās matrāci no saskares ar mitrumu vai ārstniecības līdzekļiem.


- 2) Pakariet sūkņi uz gultas malas vai novietojiet uz grīdas tādā vietā, lai sūkņim nebūtu bojājumu risks.
- 3) Savienojiet gaisa caurules ar sūkņi un matrāci.



UZMANĪBU!

Pārbaudiet un pārlicinieties, vai gaisa caurules nav savītas vai saspīestas.

- 4) Pievienojiet sūkņi strāvas vadam un pievienojiet to elektrības kontaktligzdai.

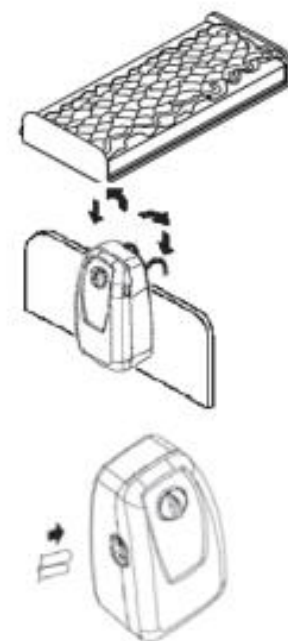

UZMANĪBU!

Pirms kontaktdakšas pievienošanas kontaktligzdai pārlicinieties, vai barošanas avots atbilst ierīces prasībām.

- 5) Ieslēdziet sūkņa barošanu (pārslēdziet slēdzi pozīcijā "ON").
- 6) Pirms pacienta uzlikšanas uz matrāča, pagaidiet apmēram 20 minūtes, lai viena no sekcijām pilnībā piepildītos ar gaisu. Regulēšanas pogu iestatiet uz maksimumu, un pēc matrāča piepūšanas iestatiet pacientam atbilstošu spiedienu.



UZMANĪBU!

Sūkņim ir jādarbojas visu laiku, kamēr tiek lietots matrācis. Pēc sūkņa izslēgšanas nedrīkst izmantot matrāci. Nedrīkst piepūst matrāci, kad pacients atrodas uz tā.



UZMANĪBU!

Pēc iestatīšanas pārlicinieties, ka barošanas vads atrodas tā, lai tas netraucētu kustību un neradītu klupšanas vai kritiena risku. Aprīkojums jānovieto tā, lai ārstam vai lietotājam būtu viegli piekļūt ierīcei.

4. TĪRĪŠANA

SŪKNIS



UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka sūknis ir atvienots no strāvas, pirms sākat tīrīšanu. Sūkni tīriet ar mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli, un turiet to tālu no putekļiem. Nedrīkst izmantot mazgāšanas līdzekļus, kas var izraisīt ķīmisku reakciju uz sūkņa plastmasas apvalka virsmas. Visām daļām jābūt rūpīgi nosusinātām pirms atkārtotas lietošanas..



UZMANĪBU!

Sūkni nedrīkst iegremdēt ūdenī vai samitrināt. Sūkni nedrīkst tīrīt zem tekoša ūdens un nedrīkst dezinficēt ar tvaiku.

MATRACIS

Matraci tīriet, noslaukot ar drānu vai sūkli, kas samitrināts siltā ūdenī ar maigu mazgāšanas līdzekli. Visām daļām jābūt rūpīgi nosusinātām pirms atkārtotas lietošanas.



UZMANĪBU!

Matrača tīrīšanai nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai alkohola bāzes mazgāšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt matrača virsmu, izraisot plaisāšanu vai materiāla sacietēšanu. Matraci nedrīkst dezinficēt ar tvaiku.



UZMANĪBU!

Pēc tīrīšanas matracis jāžāvē dabiskā veidā, nepakļaujot tiešiem saules stariem. Matraci var noslaucīt ar sausu drānu.



UZMANĪBU!

Matrača tīrīšanas biežums ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Nedrīkst pieļaut, ka matracis kļūst mitrs. Matracis nekavējoties jānotīra, ja uz virsmas ir redzams taukains pārklājums (piemēram, pēc krēmu vai ārstniecisko ziedu lietošanas). Pārāk reta tīrīšana un slikta apkope var izraisīt matrača virsmas bojājumus.

GLABĀŠANA

1. Novietojiet matraci plakanu.
2. Atvienojiet gaisa caurules no matrača.
3. Saritiniet matraci no galvas puses uz kājām (gaisa izplūdes sprauslu virzienā).

PĀRSKATĪŠANA

1. Pārbaudiet barošanas vada un kontaktdakšas nolietojumu.
2. Pārbaudiet matrača virsmu, vai tā nav nolietota, cieta vai bojāta. Pārliecinieties, ka matracis un caurules ir pareizi savienotas.
3. Pārbaudiet, vai cauruļu savienojumos nav bojājumu.
4. Pārbaudiet sūkņa darbību. Gaisa plūsmai vajadzētu mainīties starp izplūdēm ik pēc 1/2 cikla perioda.

PRODUKTA PAREDZAMĀIS KALPOŠANAS LAIKS

Produkts nodrošina drošu un uzticamu darbību garantijas periodā, ja to lieto un uztur saskaņā ar ražotāja lietošanas instrukciju. Ražotājs iesaka, lai komplekts tiktu regulāri pārbaudīts un apkalpots. Autorizētā servisā tikai tad, ja ir nolietojuma pazīmes vai aizdomas par nepareizu ierīces darbību. Citos gadījumos serviss vai ierīces pārbaude parasti nav nepieciešama.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Nav barošanas	Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir pievienota strāvas kontaktligzdai. Pārbaudiet drošinātāju darbību (ja tādi ir pieejami).
Matracis ir pārāk mīksts	Pārbaudiet, vai gaisa caurules ir pareizi pievienotas sūknim un matracam. Ja sūknim ir spiediena regulēšana, palieliniet spiedienu. Pārbaudiet matrača hermētiskumu, vai virsma nav caura vai saplaisājusi. UZMANĪBU: Sūknim ir jābūt ieslēgtam visu laiku, kamēr tiek lietots matracis.
Sūknī ik pa laikam dzirdams šņākoņa	Šis ir normāls simptoms. Kad viena no sekcijām tiek iztukšota, gaiss izplūst caur sūkni, kas var būt dzirdams.
Daļa matrača nav piepumpēta	Tas ir normāli, ja viena no sekcijām ir piepumpēta, bet otra nav. Pēc puse cikla, tas ir, 6 minūtes, sekciju pumpēšana būtu jāmaina. Ja visu laiku tiek pumpēta tikai viena no sekcijām, tas var norādīt uz matrača noplūdi vai sūkņa bojājumu.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdzēja novērst problēmu, tieši sazinieties ar vietējo pārstāvi. Iespējams, būs nepieciešama konsultācija ar tehnisko servisu.



UZMANĪBU!

Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, nemēģiniet noņemt korpusu. Jebkādos remontdarbus drīkst veikt tikai ražotāja autorizēts serviss.



UZMANĪBU!

Pievienoto remonta komplektu var izmantot tikai pēc garantijas perioda beigām. Matrača remonts bez bojājuma paziņošanas autorizētajam servisam izraisa tūlītēju garantijas tiesību zaudēšanu.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SARAKSTS	SŪKŅA SPECIFIKĀCIJA
Modelis	Pneimatiskā matrača sūknis BioFlote™ 2000
Barošana	230V/50Hz
Drošinātājs	1A
Sūkņa izmēri cm	27 cm x 11 cm x 9.5 cm
Sūkņa svars	1.2 kg
Enerģijas patēriņš	7 W
Cikla ilgums	10 - 12 min.
Spiediena diapazons	40 mmHg - 100 mmHg
Sūkņa jauda	5 litri/min.

SARAKSTS	MATRAČA SPECIFIKĀCIJA
Modelis	BioFlote™ 2000
Veids	Burbulveida (130 burbuļi)
Matrača izmēri cm	200 x 90 x 6.5 - pēc piepūšanas
Matrača svars	1,9 kg
Maksimālais lietotāja	130 kg
Materiāls	Polivinilhlorīds (atbilst EN-71)
Krāsa	bēšs
Vides temperatūra	Darbība: 5°C~ 40°C Uzglabāšana: 25°C~70°C
	Transportēšana: -25^ līdz 70^
Relatīvais mitrums	Darbība: 15%~90%, Uzglabāšana: 10%~90% Transportēšana: 10%~90%
Atmosfēras spiediens	40 mmHg - 100 mmHg

PIEZĪME

1. Augstāk minētie tehniskie dati ir aktuāli visās vietās ar vienādiem elektroenerģijas parametriem.
2. Citu tehnisko dokumentu iegūšanai sazinieties ar piegādātāju.
3. Produkts jāutilizē saskaņā ar vietējiem juridiskajiem prasībām.

PIELIKUMS A: EMC informācija

Ražotāja vadlīnijas un deklarācija - elektromagnētiskā emisija:

Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai zemāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Šīs ierīces lietotājam jānodrošina, ka tā tiek izmantota šādā vidē.

Emisijas tests	Atbilstība	Elektromagnētiskās vides - vadlīnijas
RF emisijas CISPR 11	1. grupa	Ierīce izmanto RF enerģiju tikai iekšējām funkcijām. Tādēļ RF emisijas ir ļoti zemas un nevar izraisīt nekādus traucējumus tuvumā esošajām elektroniskajām ierīcēm.
RF emisijas CISPR 11	A klase	
Harmoniskas emisijas IEC61000-3-2	A klase	Ierīce ir piemērota lietošanai visās telpās, tostarp mājokļos, un to var pieslēgt publiskajam zemsprieguma elektrotīklam.
Sprieguma svārstības / svārstību emisijas IEC61000-	Atbilst	

Vadlīnijas un ražotāja deklarācija - elektromagnētiskā izturība:

Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai zemāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Šīs ierīces lietotājam jānodrošina, ka tā tiek izmantota šādā vidē.

Izturības tests	IEC60601 Testa līmenis	Atbilstība	Elektromagnētiskās vides - vadlīnijas
Elektrostatiskā izlāde (ESD) IEC61000-4-2	±6kV kontakts ±8kV gaiss	±6kV kontakts ±8kV gaiss	Grīdām jābūt no koka, betona vai keramikas flīzēm. Ja grīdas ir pārklātas ar sintētiskiem materiāliem, relatīvais mitrums jābūt vismaz 30%
Ātri elektriskie pārejoši procesi / svārstību sērija IEC61000-4-4	±2kV barošanas līnijām ±1kV ieejas/izejas līnijām	±2kV barošanas līnijām ±1kV ieejas/izejas līnijām	Barošanas avota kvalitātei jābūt tipiskai (ne tādai kā rūpniecībā vai slimnīcās)
Vilnis IEC61000-4-5	±1kV līnijas-līnijas ±2kV līnijas-zeme	±1kV līnijas-līnijas	Barošanas avota kvalitātei jābūt tipiskai (ne tādai kā rūpniecībā vai slimnīcās)
Sprieguma kritumi, īsi pārtraukumi un sprieguma variācijas barošanas līnijās IEC61000-4-11	<5%Ut (>95% kritums UT) 0,5 ciklam 40%UT (60% kritums UT) 5 cikliem 70%UT (30% kritums UT) 25 cikliem <5%UT (>95% kritums UT) 5 sekundēm	<5%Ut (>95% kritums UT) 0,5 ciklam 40%UT (60% kritums UT) 5 cikliem 70%UT (30% kritums UT) 25 cikliem <5%UT (>95% kritums UT) 5 sekundēm	Barošanas avota kvalitātei jābūt tipiskai (ne tādai kā rūpniecībā vai slimnīcās). Ja lietotājs vēlas nepārtrauktu un netraucētu ierīces darbību, tam jānodrošina pastāvīga barošana vai baterijas.
Magnētiskais lauks (50/60Hz) IEC6100-4-8	3A/m	3A/m	Magnētiskā lauka frekvence jābūt līmenī, kas raksturīgs netipiskām vietām, tipiskām rūpnieciskajā vai slimnīcu vidē.

PIEZĪME: Ut ir A.C. barošanas sprieguma vērtība pirms testu veikšanas

Vadlīnijas un ražotāja deklarācija - elektromagnētiskā izturība:

Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai zemāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Šīs ierīces lietotājam jānodrošina, ka tā tiek izmantota šādā vidē.

Izturības tests	IEC60601 Testa līmenis	Atbilstība	Elektromagnētiskās vides - vadlīnijas
Vadu RF	3Vrms 150kHz līdz	3Vrms	Pārnēsājamās un mobilās RF radiouztvērējierīces jāizmanto ne tuvāk par jebkuru ierīces daļu, ieskaitot kabeļus, nekā ieteicamā attāluma aprēķināšana, pamatojoties uz vienādojumu, kas atbilst raidītāja frekvencei. Ieteicamais attālums: $d = 1.35 \sqrt{P}$ no 150kHz līdz 80MHz $d = 1 \sqrt{P}$ no 80MHz līdz 800MHz $d = 1 \sqrt{P}$ no 800MHz līdz 2,5GHz kur P ir maksimālā raidītāja nominālā jauda vatos (W) pēc raidītāja ražotāja, un d ir ieteicamais attālums metros (m).
IEC61000-4-6	80MHz ārpus ISM joslas	3V/m	Pastāvīgo RF raidītāju lauka stiprums, noteikts pēc elektromagnētiskā lauka apstākļiem, jābūt zemāks par atbilstības līmeni katrā frekvenču diapazonā. Traucējumi var rasties ierīču tuvumā, kuras marķētas ar šādu simbolu:
Starojums	3V/m 80MHz līdz		Elektromagnētiskās vides - vadlīnijas
RF IEC61000-4-3	2,5GHz		Pārnēsājamās un mobilās RF radiouztvērējierīces jāizmanto

SIMBOLU SKAIDROJUMI

	Ražotājs
	CE marķējums
	Atsauces numurs
	Ražošanas datums
	Skatīt lietošanas instrukciju
	Brīdinājums
	Sērijas numurs
	Augšpuse, neapgāzt
	Uzglabāt sausā vietā
	Trausls, apieties uzmanīgi
	BF tipa daļas

	II aizsardzības klases ierīce
IP21	Aizsardzība pret cietiem objektiem, kuru izmērs ir 12,5mm vai lielāks. Aizsardzība pret vertikāli krītošiem ūdens pilieniem
	Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu (WEEE) un Polijas Likumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Šis marķējums norāda, ka ierīce pēc tās lietošanas beigām ir jānodod atkritumu pārstrādes punktā
	Negriezt
	Pārstrāde



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.2
Wydano: 02/2021

GARANTIJAS KARTE PNEIMATISKAIS MATRACIS BioFlote™ 2000

Modelis:	Sērijas numurs:	Pārdošanas datums:	Pārdevēja paraksts un zīmogs:

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

- Ražotājs apliecina klientam, ka šīs garantijas kartes priekšmets ir rūpnieciski jauns un augstas kvalitātes.
- Matrača un pneimatiskās sūkņa garantijas periods ir 18 mēneši no pārdošanas datuma garantijas kartē.
- Reklamācijas izskatīšanas pamatā ir tīra, pilnīga produkta piegāde ar pareizi aizpildītu garantijas karti un pirkuma pierādījumu (čeks, PVN rēķins). Dokumentu trūkums vai netīra produkta piegāde rada reklamācijas izskatīšanas apturēšanu vai atteikumu.
- Reklamācijas tiek izskatītas pēc iespējas ātrāk, ne ilgāk kā 14 dienu laikā no preces piegādes brīža servisam. Ja nepieciešams pasūtīt detaļas no ārzemēm, šis periods var pagarināties, par ko reklamētājs tiks informēts.
- Iespējamie produkta defekti tiks novērsti uzņēmuma REHA FUND Sp. z o.o. vai autorizēto servisa speciālistu veiktā remontā, ja matracis un sūknis tiks izmantoti saskaņā ar lietošanas instrukcijā norādīto nolūku un ieteikumiem.
- Serviss ir tiesīgs atteikt garantijas remontu, ja garantijas karte ir nesalasāma vai jebkādi dati ir mainīti vai laboti.
- Garantija neattiecas uz:
 - darbībām, kas saistītas ar produkta apkopi, tīrīšanu, lietošanu, uzglabāšanu un regulēšanu, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā;
 - daļām, kas noliektas normālas lietošanas laikā;
 - mehāniskiem un termiskiem bojājumiem, piemēram, skrāpējumiem, griezumiem utt.;
 - bojājumiem, kas radušies, lietojot produktu neatbilstoši lietošanas instrukcijai, nolaidības, patstāvīgu remontu, pārveidojumu, konstrukcijas izmaiņu vai nejaušu notikumu rezultātā.
- Pirms iekārtas nodošanas autorizētajiem servisa speciālistiem, tā jātīra saskaņā ar lietošanas instrukciju, lai būtu piemērota servisa pārbaudei.
- Remontus un rezerves daļu nomaiņu drīkst veikt tikai uzņēmuma Reha Fund Sp. z o.o. autorizētie servisa speciālisti.

10. Neattaisnotu pieteikumu gadījumā (produkts ir darba kārtībā) vai lietotāja vainas dēļ radītu bojājumu gadījumā, visas ar reklamācijas izskatīšanu saistītās izmaksas sedz reklamētājs, piemēram, piegādes izmaksas.
11. Jebkuru remontu vai modifikāciju veikšana bez autorizēta servisa paziņošanas izraisa tūlītēju garantijas tiesību zaudēšanu.
12. Garantijas aizsardzības teritoriālais aptvērums ir Polijas Republikas teritorija.
13. Pārdotās preces garantija neizslēdz, neierobežo un nepārtrauc klienta tiesības, kas izriet no preces neatbilstības līgumam.

SERVISA REMONTU UZSKAITE (aizpilda serviss)

Nr.	Pieteikuma datums	Pasūtījuma numurs	Defekta apraksts/Remonta apjoms	Remonta izpildes datums	Servisa zīmogs un paraksts
1.					
2.					

PIEZĪMES