

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
BioFlote™ 5000 PRETIZGULĒJUMU  
MATRACIS**




**PIEZĪME.**
**Pirms matrača lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus.**
**I. IEVADS**

Cienījamie lasītāji!

Paldies, ka izvēlējāties REHA FUND Sp. z o.o. – vadošo medicīnisko aprīkojumu un rehabilitācijas izstrādājumu piegādātāju Polijā.

Lietošanas instrukcija sniedz svarīgus padomus un ieteikumus, kas nepieciešami ierīces pareizai lietošanai. Saglabājiet šo lietošanas instrukciju turpmākai atsaucei.

\* Attēli tālāk sniegtajos norādījumos ir tikai ilustratīviem nolūkiem.

**VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA**

Mainīga spiediena pretizgulējumu matraču sistēma izmanto modernu tehnoloģiju, lai nodrošinātu augstas kvalitātes ierīci un maksimālu komfortu. Tas ir paredzēts izgulējumu profilaksei un ārstēšanai.

Sistēma ir pārbaudīta un atbilst tālāk norādītajiem standartiem.

EN 60601-1-2: 2007, SRTĪK 11:2009, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004, IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008.

**EMS BRĪDINĀJUMS**

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst medicīnisko ierīču standarta EN 60601-1-2:2007 prasībām. Šie ierobežojumi nodrošina aizsardzību pret kaļīgiem traucējumiem tipiskā medicīniskā vidē. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radioviļņus, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota saskaņā ar norādījumiem, tā var radīt traucējumus citām tuvumā esošajām ierīcēm. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā vidē neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada traucējumus citai iekārtai, ko var noteikt, ieslēdzot un izslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no turpmāk norādītajiem pasākumiem.

- Mainīt uztverošās ierīces orientāciju vai pozīciju.
- Palielināt attālumu starp ierīcēm.
- Pievienot ierīci kontaktligzdai, kas atšķiras no tās, kurai pievienotas citas ierīces.
- Lūgt palīdzību ražotājam, piegādātājam vai servisa tehnikim.


**PIEZĪME.**
**Ierīci nav piemērots lietot uzliesmojošu šķidrumu un gāzu tuvumā. Matraci nav paredzēts lietot uz vairāku segmentu gultām. Gultas galvgaļa lieces leņķis nedrīkst pārsniegt 30°.**
**II SPECIFIKĀCIJAS**
**TEHNISKIE DATI**

| SARAKSTS            | SŪKŅA SPECIFIKĀCIJAS                         |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Modelis             | Pretizgulējumu matrača sūkņis BioFlote™ 5000 |
| Barošanas avots     | 230 V/50 Hz                                  |
| Drošinātājs         | 1 A                                          |
| Sūkņa izmēri cm     | 28 × 15 × 9                                  |
| Sūkņa svars         | 2,2 kg                                       |
| Enerģijas patēriņš  | 7 W                                          |
| Cikla ilgums        | 12 min.                                      |
| Spiediena diapazons | 30–60 mmHg                                   |
| Sūkņa jauda         | 8 litri/min.                                 |

| SARAKSTS                             | SŪKŅA SPECIFIKĀCIJAS                                                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelis                              | BioFlote™ 5000 pretizgulējumu matracis                                                            |
| Veids                                | Kabata (17 gaisa kabatas)                                                                         |
| Matrača izmēri cm                    | 203 x 90 x 12,7 – pēc piepūšanas                                                                  |
| Matrača svars                        | 5,2 kg                                                                                            |
| Maksimālais lietotāja svars          | 160 kg                                                                                            |
| Materiāls                            | Neilons/polivinilhlorīds                                                                          |
| Krāsa                                | zila                                                                                              |
| Apkārtējās vides temperatūra         | Darbs: no 5 °C līdz 40 °C<br>Uzglabāšana: no 25 °C līdz 70 °C<br>Transports: no -25 °C līdz 70 °C |
| Apkārtējās vides relatīvais mitrums: | Darbs: 15 % ~ 90 %<br>Uzglabāšana: 10 % ~ 90 %<br>Transports: 10 % ~ 90 %                         |
| Atmosfēras spiediens                 | 30–60 mmHg                                                                                        |

#### PIEZĪME.

1. Iepriekšminētie tehniskie parametri ir spēkā visās vietās, kur ir vienādi elektroenerģijas parametri.
2. Lai iegūtu citus tehniskos dokumentus, sazinieties ar savu piegādātāju.
3. Atbrīvojieties no izstrādājuma, ievērojot vietējās tiesiskās prasības.

#### A PIELIKUMS: EMS INFORMĀCIJA

##### Vadlīnijas un ražotāja deklarācija – elektromagnētiskā emisija

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tālāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Šīs ierīces lietotājam jānodrošina, ka tā tiek izmantota atbilstošā vidē.

| Emisiju tests                                          | Atbilstība | Elektromagnētiskā vide – vadlīnijas                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF emisijas SRTĪK 11                                   | 1. grupa   | Ierīce izmanto RF enerģiju tikai iekšējām funkcijām. Tāpēc RF emisijas ir ļoti zemas un tās nevar radīt traucējumus tuvumā esošajām elektroniskajām ierīcēm. |
| RF emisijas SRTĪK 11                                   | B klase    |                                                                                                                                                              |
| Harmoniku emisijas IEC 61000-3-2                       | A klase    | Ierīce ir piemērota lietošanai visās telpās, tostarp sadzīves telpās, un to var pieslēgt publiskajam zemsprieguma elektroīklam.                              |
| Sprieguma svārstības/vibrācijas emisijas IEC 61000-3-3 | Atbilst    |                                                                                                                                                              |

##### Vadlīnijas un ražotāja deklarācija – elektromagnētiskā pretestība

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tālāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Šīs ierīces lietotājam jānodrošina, ka tā tiek izmantota atbilstošā vidē.

| Imunitātes tests                                    | IEC60601 testa līmenis                                        | Atbilstība                                                  | Elektromagnētiskā vide – vadlīnijas                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrostatiskā izlāde (ESD) IEC 61000-4-2          | ±6 kV saskarē<br>±8 kV gaisā                                  | ±6 kV saskarē<br>±8 kV gaisā                                | Grīdām jābūt izgatavotām no koka, betona vai keramikas flīzēm. Ja grīdas ir pārklātas ar sintētisku materiālu, relatīvajam mitrumam jābūt ne mazākam par 30 %. |
| Elektriska īsaiļīgā pāreja/pieplūdums IEC 61000-4-4 | ±2 kV elektroapgādes līnijām<br>±1 kV ievades/izvades līnijām | ±2 kV elektroapgādes līnijām<br>±1 kV ievade/izvade līnijām | Elektroapgādes kvalitātei jābūt kā tipiskā komerciālā vai slimnīcas vidē.                                                                                      |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pārsprieguma vilņu forma IEC 61000-4-5                                                  | $\pm 1$ kV līnijas<br>$\pm 2$ kV līnijas – zemējums                                                                                                                                          | $\pm 1$ kV līnijas | Elektroapgādes kvalitātei jābūt kā tipiskā komerciālā vai slīmnīcas vidē.                                                                                                                                                                 |
| Sprieguma kritumi, īsi pārtraukumi un sprieguma izmaiņas elektroapgādes ievades līnijām | $< 5\%$ UT ( $> 95\%$ pieaugums UT) 0,5 cikliem<br>$40\%$ UT ( $60\%$ pieaugums UT) 5 cikliem<br>70 % UT<br>(30 % pieaugums UT) 25 cikliem<br>$< 5\%$ UT ( $> 95\%$ pieaugums UT) 5 sekundes |                    | Elektroapgādes kvalitātei jābūt kā tipiskā komerciālā vai slīmnīcas vidē. Ja lietotājam nepieciešama pastāvīga darbība elektroapgādes pārtraukumu laikā, ieteicams nodrošināt ar strāvu no nepārtrauktās barošanas avota vai akumulatora. |
| Jaudas frekvences (50/60 Hz) magnētiskais lauks IEC 6100-4-8                            | 3 A/m                                                                                                                                                                                        | 3 A/m              | Jaudas frekvences magnētiskajiem laukiem jābūt tādā līmenī, kāds raksturīgs parastai atrašanās vietai tipiskā komerciālā vai slīmnīcas vidē.                                                                                              |
| PIEZĪME. Ut ir maiņstrāvas elektroapgādes spriegums pirms pārbaudes līmeņa izmantojuma  |                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |


### Vadlīnijas un ražotāja deklarācija – elektromagnētiskā pretestība

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tālāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Šīs ierīces lietotājam jānodrošina, ka tā tiek izmantota atbilstošā vidē.

| Imunitātes tests            | IEC60601 testa līmenis                                      | Atbilstība | Elektromagnētiskā vide – vadlīnijas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF vadītspēja IEC 61000-4-6 | 3 Vrms no 150 kHz līdz 80 MHz ārpus ISM joslas <sup>a</sup> | 3 Vrms     | Portatīvo un mobilo RF sakaru aprīkojumu nevienai daļai, nedz arī kabeļiem nedrīkst izmantot tuvāk par ieteicamo savstarpējo attālumu, kas aprēķināts pēc raidītāja frekvencei piemērojamā vienādojuma. Ieteicamais attālums:<br>$d = [3^{5/20}] \sqrt{P}$ no 150 kHz līdz 80 MHz<br>$d = [3^{5/20}] \sqrt{P}$ no 80 MHz līdz 800 MHz<br>$d = [7/20] \sqrt{P}$ no 800 MHz līdz 2,5 GHz<br>kur <b>P</b> ir raidītāja maksimālā nominālā izejas jauda vatos (W) atbilstīgi raidītāja ražotāja datiem un <b>d</b> ir ieteicamais savstarpējais attālums metros (m). <sup>b</sup> Fiksēto RF raidītāju lauka stiprumam, kas noteikts vietas elektromagnētiskajā izpētē <sup>c</sup> , jābūt mazākam par atbilstības līmeni katrā frekvences diapazonā. <sup>d</sup> Traucējumi var rasties tāda aprīkojuma tuvumā, kas apzīmēts ar šo simbolu:  |
| RF starojums IEC 61000-4-3  | 3 V/m no 80 MHz līdz 2,5 GHz                                | 3 V/m      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


### PNEIMATISKĀ SŪKŅA APRAKSTS

1. Ātri savienojama līgzda.
2. Priekšējais panelis.
3. Transporta savienotājs.
4. Barošanas vads.
5. Gaisa filtrs.
6. Sūkņa stiprinājumi.

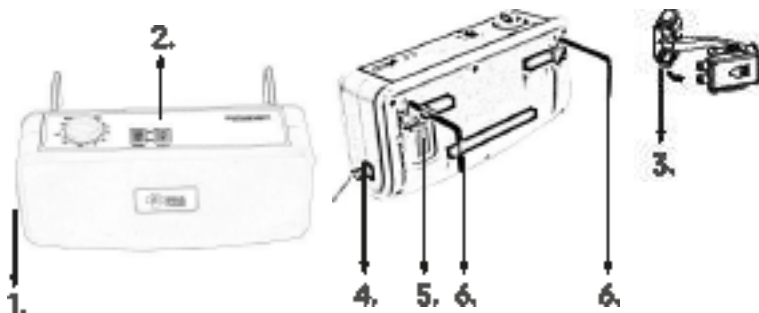

## PRIEKŠĒJAIS PANELIS

1. Gaisa spiediena regulators – atbild par gaisa spiediena vērtību matracī. Pagriežot pogu "MAX" virzienā, spiediens palielinās, savukārt, pagriežot pogu "MIN" virzienā, spiediens matracī samazinās. Spiediens ir iestatīts attiecībā pret pacienta svaru, kas norādīts uz skalas ap ciparnīcu.
2. Galvenais energopadeves slēdzis – lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci.

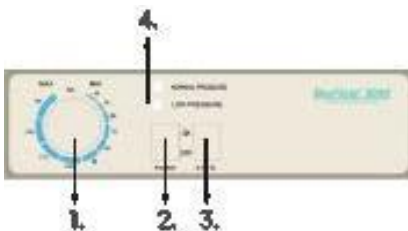

3. Statiskās funkcijas slēdzis – ļauj piepūst visu matraci, nodrošinot pacientam vieglāku piecelšanos un aprūpētajiem iespēju veikt darbības, kas prasa stabilu pamatu. Pirmo reizi piepūšot matraci, ieteicams vispirms ieslēgt statisko funkciju, lai nodrošinātu ātrāku piepūšanu. Statiskā funkcija piepilda visu matraci aptuveni 6 minūšu laikā pēc pogas aktivizēšanas.
4. Vizuāls zema spiediena trauksmes signāls – brīdina aprūpētājus par iespējamu matrača noplūdi, kas var traucēt tā pareizu darbību. Ja spiediens matracī ir pārāk zems, iedegas dzeltenā gaisma (zems spiediens). Kad matracis darbojas pareizi, iedegas zaļā gaisma (normāls spiediens).

## PRETIZGULĒJUMU KOMPLEKTA UZBŪVE

1. CPR vārsti.
2. Spiediena kontrolēts sūkns.
3. Kabatas matracis ar pārvalku.
4. Ātrais savienotājs.
5. Transporta savienotājs.
6. Gaisa vadi.



## III IZSTRĀDĀJUMA MĒRĶIS UN IZMANTOŠANA

Šis izstrādājums ir paredzēts cilvēkiem:

- kuriem nepieciešama III pakāpes izgulējumu ārstēšana un profilakse, nodrošinot optimālu pacienta komfortu;
- kuri pastāvīgi atrodas mājās vai slimnīcā, ilgstošai aprūpei un izgulējumu ārstēšanai;
- kuriem nepieciešama ārstēšana un sāpju mazināšana, ko izraisa spiediens uz ķermeņa mīkstajiem audiem, ja to ir ieteicis ārsts vai fizioterapeits.

Šo izstrādājumu drīkst lietot personas, kuras ir apmācītas veikt vispārējās aprūpes procedūras un kurām ir nepieciešamās zināšanas par izgulējumu profilaksi un ārstēšanu.

## IV. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot pacientiem ar muguras smadzeņu bojājumu.

## V. VISPĀRĪGI DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

### DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Lietojot elektriskos izstrādājumus, īpaši bērnu klātbūtnē, jāievēro visi drošības pasākumi, tostarp tālāk norādītie.

### BĪSTAMI!

#### Lai samazinātu elektrotraumu risku

1. Nelietojiet ierīci vannojoties.
2. Vienmēr izslēdziet ierīci uzreiz pēc lietošanas.
3. Nenovietojiet un neuzglabājiet ierīci vietā, kur tā var nokrist vai tikt ievilkta vannā vai izlietnē.
4. Nenovietojiet un neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
5. Neaiztīciet ierīci, kas ir iekritusi ūdenī. Ja tā notiek, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrības tīkla.

### BRĪDINĀJUMI!

#### Lai samazinātu elektrotraumu, aizdegšanās vai savainojumu risku

1. Novērtējiet iespējamību, ka ierīce kļūs par pacienta slazdu, ierobežojot pārvietošanos vai pilnībā ieslogot. Ja ir iespējamība, ka tas var notikt, pacientam jābūt pastāvīgā uzraudzībā.
2. Nelietot pacientiem ar muguras smadzeņu bojājumu.


3. Ir svarīgi uzraudzīt ierīces darbību, kad to lieto bērni vai atrodas to tuvumā. Dažus mazus komponentus var viegli noņemt, radot risku, ka bērni var aizīrīties vai saņemt elektriskās strāvas triecienu.
4. Lietojiet saskaņā ar lietošanas instrukcijā norādīto mērķi. Nelietojiet mērķiem, kurus nav ieteicis ražotājs. Neizmantojiet cita veida matračus, izņemot tos, kurus norādījis ražotājs.
5. Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi, ja vads vai kontaktakša ir bojāta, nokritusi vai nonākusi saskarē ar ūdeni. Šādā gadījumā ierīce jānogādā pilnvarotā servisa centrā pārbaudei/remontam.
6. Glabājiet strāvas vadu attālkā no karstām virsmām.
7. Netraucējiet gaisa ieplūdi. Nenovietojiet uz mīkstas virsmas (gultas, matrača, segas), kas var traucēt gaisa ieplūdi. Uzturiet apkārtni ap sūkni tīru – prom no matiem, blaugznām, atgriezumiem vai citām mazām daļiņām.
8. Nepārveidojiet/nereмонтējiet ierīci pats bez ražotāja atļaujas.
9. Ja jums ir aizdomas, ka pēc saskares ar matraci varētu rasties vai jau ir radušies alerģiski simptomi, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.
10. Ja pacients pēc rehabilitācijas gultas galvgali, ieteicams pazemināt matrača piepūšanas līmeni, izmantojot sūkņa pogu.
11. Par katru nopietnu gadījumu, kas saistīts ar izstrādājumu, jāziņo ražotājam un kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā dzīvo lietotājs un/vai pacients.

## VI. LIETOŠANAS METODE

### UZSTĀDĪŠANA UN IZPAKOŠANA

Sūknis un matracis ir iepakots kartona kastē, lai aizsargātu tā saturu. Noņemiet iepakojumu un pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Bojājuma gadījumā nekavējoties sazinieties ar izplatītāju.

### UZSTĀDĪŠANA

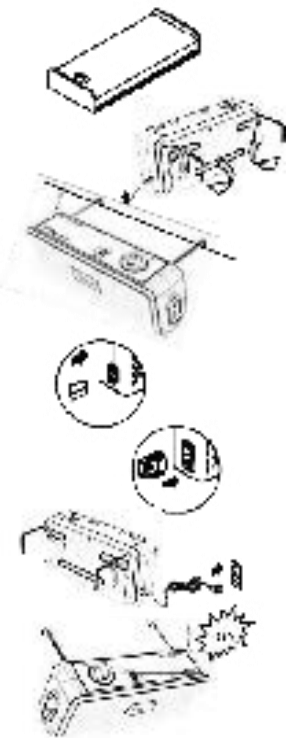

1) Sakārtojiet matraci uz gultas. Matraci ieteicams novietot tā, lai gaisa vadu ieplūdes gali atrastos kāju pusē. Pārliecinieties, ka atloki abās matrača pusēs ir nospiesti zem gultas matrača. Izmantojiet drošības siksnas, lai piestiprinātu matraci pie gultas.

#### PIEZĪME.

**Matracis jāpārklāj ar palagu, lai novērstu tiešu ādas saskari, uzlabotu pacienta komfortu un pasargātu no mitruma vai zāļu (krēmu, ziežu) iedarbības.**

2) Atlokiet ākus un pakariet sūkni uz gultas malas vai novietojiet to uz grīdas piemērotā vietā, lai izvairītos no sūkņa bojājumiem.

3) Pievienojiet gaisa vadus sūknim un matracim. Tipisks "klikšķis" norāda uz to, ka vadi ir pareizi pievienoti.

#### PIEZĪME.

**Pārbaudiet un pārliecinieties, ka gaisa vadi un kabatas nav savītas vai spiestas.**

4) Pievienojiet sūkni kontaktligzdai ar barošanas vadu.

#### PIEZĪME.

**Pirms kontaktdakšas pievienošanas kontaktligzdai pārliecinieties, ka barošanas avots atbilst ierīces prasībām. Ierīci var arī atvienot, izņemot kontaktdakšu no kontaktligzdas. Elektrības kontaktlīdždai jābūt tādā stāvoklī, lai būtu iespējams ātri atvienot ierīci no strāvas.**

5) Ieslēdziet sūkņa barošanas avotu (pārslēdziet pozīcijā "ON"). Matracim piepūšoties, iedegsies zema spiediena indikators (dzeltenā gaismā).

6) Pirms pacienta novietošanas uz matrača, uzgaidiet aptuveni 30 minūtes, līdz viena no sekcijām ir pilnībā piepūsta. Iestatiet regulatora pogu uz maksimālo, un, kad matracis būs piepūsts, pielāgojiet spiedienu atbilstoši pacienta svaram. Matracs ir gatavs lietošanai, kad iedegas normālā spiediena indikators (zaļā gaismā).

**PIEZĪME.**


Sūknī drīkst lietot tikai ar ražotāja ieteikto matraci. Neizmantojiet sūknī citiem mērķiem. Ir svarīgi atzīmēt, ka matrača lietošanas laikā sūknim vienmēr jābūt ieslēgtam. Nesūknējiet matraci, kamēr uz tā atrodas pacients.

**Daži komentāri par uzstādīšanu**

Pēc uzstādīšanas pārliecinieties, ka strāvas kabelis ir novietots tā, lai tas netraucētu ceļu un neradītu pakļupšanas vai krišanas risku. Ierīce jānovieto tā, lai ārsti vai lietotājs varētu tai viegli piekļūt un, ja nepieciešams, ātri atvienot.

**PIEEJAMĀS FUNKCIJAS**◆ CPR vārsts


Ja kāda iemesla dēļ no matrača nepieciešams ātri izlaist gaisu, pavelciet CPR vārsta rokturi. CPR vārsts atrodas matrača galvas galā.

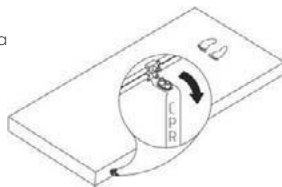◆ Spiediena regulēšana

Izmantojot spiediena regulatoru, lietotājs var iestatīt atbilstošu matrača mīkstumu un optimālo spiedienu atbilstoši pacienta svaram. Par matrača stingrības līmeņa iestatīšanu jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu.

◆ Transports

Ātrās atļaišanas savienojumu var izmantot, lai bloķētu gaisa izplūdi no matrača transportēšanas laikā, ļaujot to viegli pārvietot.

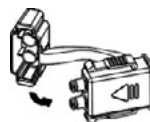◆ Vizuāls zema spiediena trauksmes signāls

Brišana aprūpētājus par iespējamu matrača noplūdi, kas var traucēt tā pareizu darbību. Trauksmes signāls tiek iedarbināts automātiski.

**IERĪCES DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA****PIEZĪME.**

Lai novērstu elektrotraumu risku, nemēģiniet noņemt korpusu. Par visiem remontdarbiem jāziņo pilnvarotajam servisa centram. Iekļauto remonta komplektu var izmantot pēc garantijas termiņa beigām. Ja matrača remonts tiek veikts, neziņojot par bojājumiem pilnvarotajam servisa centram, tiks nekavējoties zaudētas garantijas tiesības.

| PROBLĒMA                                | RISINĀJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nav jaudas                              | Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir ievietota kontaktligzdā, kur ir spriegums.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Iedegas zema spiediena indikators       | Pārbaudiet, vai gaisa vadi pie sūkņa un matrača ir pareizi pievienoti. Pārbaudiet savienojumus starp kabatām.<br>Pārbaudiet, vai CPR vārstā nav noplūdes.<br>Ja sūknim ir spiediena kontrole, palieliniet spiedienu.<br>Pārbaudiet, vai matrača kabatas nav perforētas vai saplaisājušas.<br><b>PIEZĪME.</b> Lietojot matraci, sūknim vienmēr jābūt ieslēgtam. |
| Ik pa laikam sūknī ir dzirdams troksnis | Tā ir normāla parādība. Kad viena sekcija ir iztukšota, caur sūknī izplūst gaiss, ko var dzirdēt.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pacients sagāžas                        | Spiediena vērtība, kas iestatīta uz sūkņa ar regulatoru, nav piemērota pacientam. Palieliniet spiedienu un gaidiet, līdz kabatās piepildīsies gaiss.                                                                                                                                                                                                           |
| Matracis nenotur savu formu             | Pārbaudiet, vai kabatas ir piestiprinātas vietā ar siksnām, kas pievienotas matrača pamatnei, vai arī tās ir piestiprinātas pie pamatnes ar spiedpogām.                                                                                                                                                                                                        |
| Daļa matrača ir nepiepūsta              | Tā ir normāla parādība, kad viena sekcija ir piepūsta, bet otra nav. Kad puse cikla ir pagājusi, sekcijas sūkņēšanai vajadzētu mainīties. Ja visu laiku tiek sūkņēta tikai viena no sekcijām, tas var liecināt par matrača noplūdi vai sūkņa bojājumu.                                                                                                         |

Ja iepriekšminētie padomi nepalīdzēja novērst problēmu, sazinieties tieši ar vietējo pārstāvi. Visticamāk, ka jums būs jākonsultējas ar tehnisko servisu.

## VII. TĪRĪŠANA UN APKOPE

### SŪKNIS

Tīriet sūkni ar mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli un sargājiet no putekļiem. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kas var izraisīt ķīmisku reakciju uz sūkņa plastmasas korpusa virsmas. Pirms atkārtotas lietošanas visām detaļām rūpīgi jābūt izžāvētām.



#### **PIEZĪME.**

**Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka sūknis ir atvienots no barošanas avota. Neiegremdējiet un nesamitriniet sūkni.**

### MATRACIS

Nofīriet matraci, noslaukot to ar drānu vai sūkli, kas samitrināts siltā ūdenī ar maigu mazgāšanas līdzekli. Pirms atkārtotas lietošanas visām detaļām rūpīgi jābūt izžāvētām.



#### **PIEZĪME.**

**Matrača tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus uz šķīdinātāju vai spirta bāzes. Tas var izraisīt matrača virsmas bojājumus, piemēram, plaisas vai materiāla sacietēšanu. Pēc tīrīšanas izžāvējiet matraci ēnainā vietā.**

### UZGLABĀŠANA

1. Novietojiet iztukšoto matraci uz līdzenas virsmas.
2. Ar atvērtu CPR vārstu ritiniet matraci no galvas līdz kājām uz gaisa izplūdes galiem.
3. Nostipriniet caurules, ievietojot tās matracī.

**PIEZĪME.** Matraci nedrīkst salocīt vai saspiest. Nepieļaujiet tiešu kontaktu ar saules stariem.

### PĀRBAUDE

#### **VISPĀRĪGI**

1. Pārbaudiet barošanas vada un kontaktdakšas nolietojumu.
2. Pārbaudiet, vai matrača virsma nav nodilusi, cieta vai bojāta. Pārliecinieties, ka matrača kabatas ir pareizi savienotas viena ar otru un pārbaudiet kabatu hermētiskumu.
3. Pārbaudiet, vai nav bojāti kanālu savienojumi un paši gaisa vadi (izliekumi, plaisas).
4. Pārbaudiet sūkņa pareizu darbību. Gaisa plūsmai vajadzētu mainīties starp izplūdes atverēm ik pēc 1/2 cikla perioda.



#### **PIEZĪME.**

**Ja pastāv aizdomas par matrača darbības traucējumiem, jāveic pašpārbaude. Par jebkuru kļūdu, kas traucē matrača pareizu darbību, jāziņo ražotāja pilnvarotajam servisa centram. Garantijas laikā, veicot remontdarbus patstāvīgi, var tikt zaudētas garantijas tiesības.**

### GAISA FILTRA NOMAIŅA

Gaisa filtrs ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jānomaina (ik pēc 12 mēnešiem vai vairāk). Gaisa filtra piesārņojums ir atkarīgs no vides, kurā darbojas sūknis. Nefīrs (aizsērējis) filtrs izraisīs kompresora, kas atrodas sūkņa iekšpusē, darbības traucējumus un pat to sabojās.

1. Atveriet gaisa filtra vāku, kas atrodas sūkņa korpusa aizmugurē, atbīdīdājot fiksatoru.
2. Pārbaudiet gaisa filtru un, ja nepieciešams, nomainiet to.
3. Uzlieciet filtra vāku.

## VIII. LIETOŠANAS BEIGAS

Ja matrača pārbaudes laikā tiek konstatētas novirzes, kas neatbilst ražotāja ieteikumiem. Skatīt sadaļā: Tīrīšana un apkope – nekavējoties pārtrauciet izstrādājuma lietošanu. Lietošanas beigās izstrādājums ir jāutilizē saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem.

## IX. PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS LAIKS

Izstrādājums nodrošina drošu un uzticamu darbību garantijas laikā, ja tas tiek lietots un uzturēts saskaņā ar ražotāja lietošanas instrukciju. Ražotājs iesaka komplektu pārbaudīt un apkopt tikai pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam, ja novērojamas nodiluma pazīmes vai ir aizdomas par ierīces nepareizu darbību. Citos gadījumos ierīces apkope vai pārbaude parasti nav nepieciešama.



### PIEZĪME.

**Komplektā ir iekļauta rezerves kabata. Ja tiek konstatēta matrača noplūde, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.**

## X. GARANTĪJA

Ražotājs garantē klientam, ka pārdotais izstrādājums ir pilnīgi jauns un kvalitatīvs. Izstrādājumam tiek piemērota garantija (detalizētus garantijas nosacījumus skatiet ražotāja vietnē). Izstrādājums jālieto saskaņā ar paredzēto mērķi un lietošanas instrukcijā sniegtajiem ieteikumiem.

## XI. SIMBOLU SKAIDROJUMS

|  |                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ražotājs                                    |             | Virzienā uz augšu, neapgāzt                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | CE marķējums                                |             | Sargāt no mitruma                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Kataloga Nr.                                |             | Ārsts, rīkoties uzmanīgi                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Izgatavošanas datums                        |             | BF tipa pielietojamās daļas                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Skatīt lietošanas instrukciju               |             | I aizsardzības klases ierīce                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Bīdīnājums                                  | <b>IP22</b> | Aizsardzība pret cietiem priekšmetiem, kuru izmērs ir 12,5 mm vai lielāks.<br>Aizsardzība pret vertikāli krītošām ūdens pilieniņiem.                                                                                                                                        |
|  | Partijas kods                               |             | Ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas direktīvu (EEIA) un Polijas likumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Šis marķējums norāda, ka iekārta pēc tās kalpošanas laika beigām jānodod atpakaļ elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes punktā. |
|  | Medicīniskā ierīce                          |             | Negriezīt                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Unikāls izstrādājuma identifikācijas numurs |             | Otreizējā pārstrāde                                                                                                                                                                                                                                                         |



REHA FUND Sp. z o.o.  
ul. Staniewicka 14,  
03-310 Varšava, Polija  
www.rehafund.pl



I/BioFlote5000/3/08.11.2024.  
Lietošanas instrukcijas izdošanas datums: 11.2024.